

Nova Vet

Bloed Keton en Glucose Observatiesysteem Gebruikershandleiding



Nova
Biomedical

Alleen voor diergeneeskundig gebruik
Niet voor menselijk gebruik



Nova Biomedical Taiwan Corporation

New Taipei City

Taiwan 235 (R.O.C.)

Klantenservice: bezoek onze website op www.novabiomedical.com.

Gemaakt in Taiwan

U.S. Patent No. 6,258,229, 6,837,976, 6,942,770,

CA 2,375,089, CA 2,375,092, EP 1,497,446, EP 1,497,449,

JP 4060078, en andere Amerikaanse en buitenlandse patenten in behandeling.

Copyright 2015 Nova Biomedical Corporation

REF 52899 Rev E 2015-04 NIET VOOR MENSELIJK GEBRUIK

BEDANKT.

Nova dankt u voor het kiezen van het Nova VET Bloed Keton en Glucose Controle Systeem. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de monitor en de werking ervan. Gelieve lees deze zorgvuldig door voordat u uw nieuwe Nova VET-systeem voor bloedketonen- en glucosecontrole in gebruik neemt.

en glucosecontrolesysteem gebruikt.

Het Nova VET-systeem voor bloedketonen- en glucosecontrole is ontworpen om gemakkelijk en gemakkelijk te gebruiken. Het geeft nauwkeurige resultaten in slechts 4 seconden (voor glucose) of 10 seconden (voor Keton) met behulp van een zeer klein bloedmonster. De monitor heeft ook een geheugen dat de resultaten van de Keton- of Glucosetest opslaat.

Als u contact met ons wilt opnemen, bezoek dan onze website op www.novabiomedical.com.

of

In de VS en Canada, bel 1-800-545-6682.

Buiten de VS en Canada kunt u contact opnemen met uw Nova Vet-leverancier.

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie over Nova Vet Bloedketonen- en Glucose Controle Systeem

Gebruik dit veterinaire medisch hulpmiddel onder toezicht van een

bevoegde dierenarts. De federale wetgeving (VS) beperkt dit

apparaat voor gebruik door of in opdracht van een bevoegde dierenarts.

Het Nova Vet-systeem voor bloedketonen- en glucosecontrole is

uitsluitend bestemd voor diergeneeskundig gebruik en is niet bedoeld voor

menselijk gebruik. Het systeem kan worden gebruikt bij verschillende diersoorten

dieren voor het testen van bloedketonen en glucose.

De prestatiekenmerken van het Nova Vet Blood Ketone

en glucosecontrolesysteem zijn niet vastgesteld voor

specifieke diersoorten, met uitzondering van het testen van ketonen in het hele

het testen van ketonen in het hele bloed van runderen, zoals hieronder beschreven.

Ketononderzoek bij runderen

Voor gebruikers die het Nova Vet Blood Ketone and Glucose Monitoring System willen gebruiken voor het testen van bloedketonen bij

runderen, beveelt Nova Biomedical het gebruik van een 1,25

kalibratie hellingsfactor voor keton wanneer het apparaat wordt gebruikt

om runderen te testen. Raadpleeg het hoofdstuk "Instellen van de keton helling" om de factor van 1,25 in te voeren.

Gebruikers moeten normale bloedketon- en glucose-referentiebereiken

voor specifieke diersoorten. Raadpleeg een dierenarts

voor normale streefwaarden voor ketonen of glucose.

Gebruik van keton- of glucoseteststrips of controleoplossingen van andere merken

oplossingen met het Nova Vet Blood Ketone and Glucose Monitoring System kan onnauwkeurige resultaten opleveren.

systeem kan onnauwkeurige resultaten opleveren. Het Nova Vet Bloed

Keton- en Glucosecontrolesysteem bevat kleine onderdelen

die gevaarlijk kunnen zijn als ze worden ingeslikt.

Het Nova Vet Bloedketonen- en Glucosecontrolesysteem

mag niet worden gebruikt om diabetes te diagnosticeren.

Eenheden meten Disclaimer

Het Nova Vet Bloedketonen- en Glucosecontrolesysteem is

fabrieksinstelling om ketonresultaten te rapporteren in mmol/L en glucose

resultaten in mmol/L of mg/dL.

Belangrijke veiligheidsinstructies!

- Voordat u uw nieuwe Nova Vet Bloedketon- en Glucosecontrolesysteem in gebruik neemt en glucosecontrolesysteem begint te gebruiken, dient u alle instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen. instructies in deze gebruiksaanwijzing.

- Uw monitor gebruikt een CR2450 knoopcelbatterij van 3 volt. Om uw monitor in gebruik te nemen, moet u de bijgeleverde batterij. Zie Vervanging van de batterij om een nieuwe batterij te installeren.

- Voer alle kwaliteitscontroles uit die worden aanbevolen in uw Gebruikershandleiding.

Belangrijke veiligheidsinstructies!

Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:

OPMERKINGEN geven nuttige bedieningsinformatie.

WAARSCHUWINGEN geven informatie die belangrijk is voor de bescherming van het instrument.

WAARSCHUWINGEN geven informatie die belangrijk is voor de bescherming van de gebruiker of over het risico van onnauwkeurige resultaten.

Inhoudsopgave

Beoogd gebruik.....	1
Symbolen.....	2
Inleiding.....	3
Onderdelen van de monitor.....	3
Beeldscherm van de monitor.....	4
Het Nova Vet-systeem voor bloedketonen- en glucosecontrole.....	5
Overzicht.....	6
Milieu.....	7
Keton teststrips.....	7
Belangrijke informatie over Nova Vet Keton Test Strips.....	8
Glucose teststrips.....	9
Belangrijke informatie over Nova Vet Glucose Test Strips.....	10
De tijd, datum en pieper instellen.....	12
Instellen van de ketonencurve.....	15
Instellen van de Keton Intercept.....	16
Controleoplossing uitvoeren.....	17
Controleoplossing.....	17
Een controleoplossingstest uitvoeren.....	17
Controleoplossing voor ketonen uitvoeren.....	19
Een controleoplossing voor ketonen testen.....	20
Een bloedtest op ketonen uitvoeren	24
Uw keton testresultaten.....	27
Glucose Controle Oplossing uitvoeren.....	28
Een oplossing voor kwaliteitscontrole van glucose testen.....	29
Glucose bloedtest	34
Glucose testresultaten.....	37
Testresultaten in geheugen bekijken.....	38
Basisonderhoud.....	41
Batterij controleren.....	41
Batterij vervangen.....	43
Reiniging en onderhoud.....	44
Displays, betekenissen, handelingen.....	45
Bijlage.....	58
Specificaties.....	58
Chemische metingen.....	60
Beperkingen.....	60
Instructies.....	61
Garantie.....	64

Beoogd gebruik

Het Nova Vet Bloedketonen- en Glucosecontrolesysteem is bedoeld voor de kwantitatieve meting van β -hydroxybutyraat (Keton) of glucose in vers dierlijk bloed. Het is bedoeld voor gebruik door dierenartsen als een hulpmiddel om het keton- en glucoseniveau bij dieren te controleren. Het Nova Vet Monitoring System is specifiek bedoeld voor de kwantitatieve meting van ketonen en glucose in vers volbloed dierlijke monsters.

- Het mag alleen worden gebruikt met Nova Vet Ketone and Glucose teststrips en Nova Max Plus controleoplossingen.
- Het mag NIET in de koelkast of in de auto worden bewaard.
- Het is NIET bestemd voor gebruik bij mensen.

Symbolen



WAARSCHUWING: Bloedmonsters en bloedproducten zijn potentiële bronnen van hepatitis en andere besmettelijke stoffen.

Ga voorzichtig om met alle bloedproducten. Draag handschoenen bij het uitvoeren van metingen. Items die gebruikt worden om glucose of keton, d.w.z. teststrips en alcoholdoekjes, moeten worden weggegooid in volgens de plaatselijke voorschriften om risico's voor anderen te voorkomen.

Symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding, op bijsluiters en op het Nova Vet Monitoringsysteem.



Voorzichtig, raadpleeg begeleidende documenten



Raadpleeg de instructies voor gebruik



Biologisch risico




Catalogusnummer



Temperatuur beperking

Introduction

Monitor Components

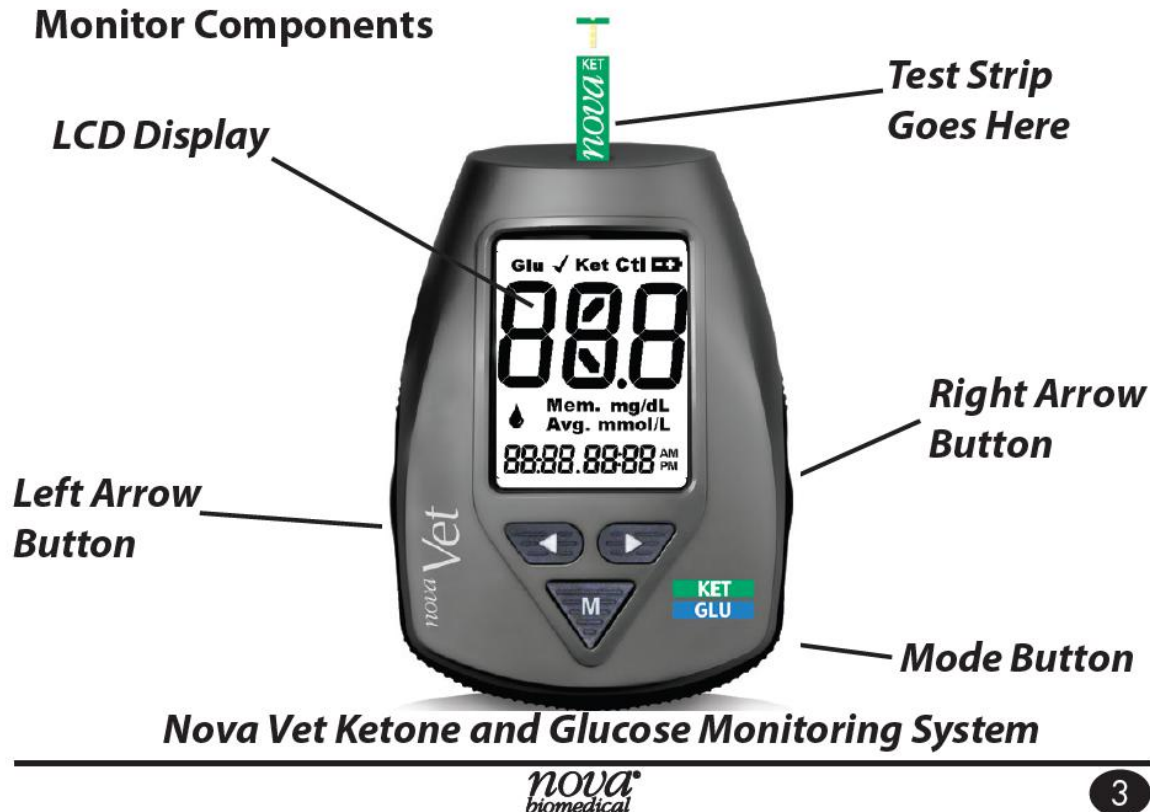


Instructie

Monitorweergave

Wanneer u het Nova Vet Monitoring System inschakelt, verschijnt kort het scherm met alle segmenten kortstondig verschijnen. Dit vertelt u dat alle segmenten naar behoren werken.

Marked Test Results

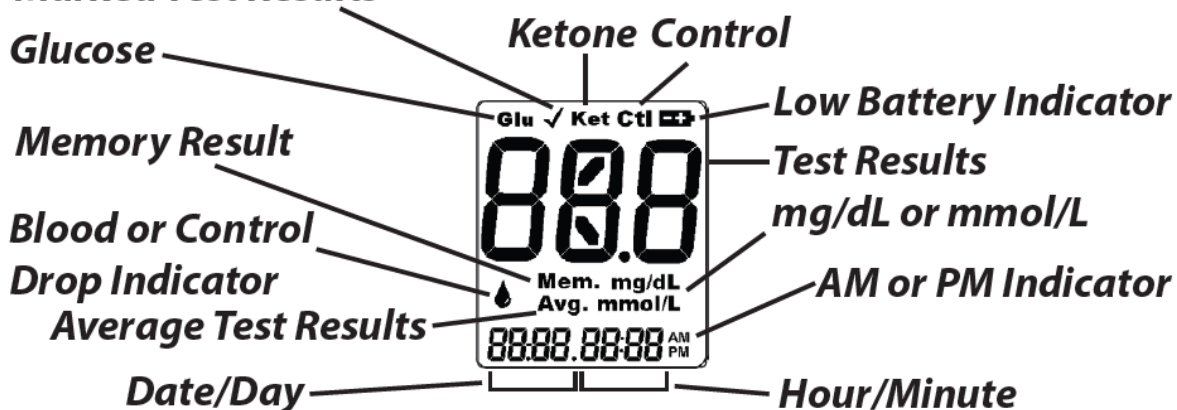

Het Nova Vet Ketonen- en Glucosecontrolesysteem

Het monitoringsysteem is een handheld testapparaat dat ketonen en glucose in volbloed meet. De teststrip wordt aangeraakt op een druppel bloed om het testproces te starten. De monitor wordt geactiveerd nadat een Nova Vet teststrip is ingebracht. Het scherm toont "Glu" of "Ket", afhankelijk van welke teststrip is geplaatst. De blauwe strook meet het bloedglucosegehalte, en de groene strook meet het Ketongehalte.

- Een eenvoudig eenstapsproces levert een resultaat op.
- De testresultaten zijn binnen 4 (Glu) of 10 (Ket) seconden beschikbaar.
- De monitor wordt gevoed door een batterij die ongeveer 1000 tests kan uitvoeren.

WAARSCHUWING: Het monitoringsysteem moet met zorg worden behandeld.

Laten vallen, ruwe behandeling, enz. kan de monitor beschadigen. Als de monitor voor langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdt u de batterij om het risico van batterijlekkage te voorkomen. Bescherm de monitor ook tegen vocht, langdurig direct zonlicht en extreme temperaturen.

Overzicht

Om een test uit te voeren, plaatst de gebruiker gewoon een teststrip; wacht tot het bloeddruppelsymbool op het scherm verschijnt ("Glu" of "Ket" verschijnt ook - de monitor is klaar). verschijnt - de monitor is klaar); brengt de teststrook naar de bloeddruppel; en verkrijgt een testresultaat. en krijgt een testresultaat in 4 (Glu) of 10 (Ket) seconden. Het testresultaat wordt automatisch opgeslagen in het geheugen van de monitor. De gebruiker kan de in de monitor opgeslagen testgegevens oproepen en bekijken.

Environmental

- The storage temperature range for the monitor: -13 - 115°F (-25 - 45°C)
- The storage temperature range for the Test Strips: 59-86°F (15-30°C)
- The monitor operational temperature range: 23-113°F (-5-45°C)
- The relative humidity range: 10% to 90% non-condensing

Ketone Test Strips

The Nova Vet Ketone Strips are designed for use with your Nova Vet Monitoring System only. Use each test strip only once, then discard. **DO NOT** reapply blood to the test strip.

- Requires a very small blood volume: 0.8 µL (ketone)
- Automatically draws blood into the test area of the strip

Kan met schone, droge handen worden gehanteerd zonder de metingen.



Belangrijke informatie over Nova Vet Ketone Test Strips

- Gebruik alleen Nova Vet Ketone Test Strips bij het testen op ketonen.
- Haal een teststrip alleen uit het flesje als u klaar bent om te testen.

- Bewaar de verpakking van de teststrips op een koele, droge plaats tussen 59-86°F (15-30°C). Niet koelen of invriezen.
- Niet in de buurt van hitte of vocht bewaren.
- Bewaar de teststrips alleen in de originele flacon.

Nadat u een teststrip uit de flacon hebt gehaald, moet u onmiddellijk de dop van de flacon terugplaatsen en goed sluiten.

- Gebruik de teststrips niet na de op de verpakking de verpakking, omdat dit tot onnauwkeurige resultaten kan leiden.
- Teststrips mogen niet langer dan 3 maanden na opening worden bewaard. de flacon. Wanneer u een nieuwe flacon met teststrips voor het eerst opent, tel dan 3 maanden vooruit en schrijf die datum op de flacon. Gooi alle Gooi de overgebleven teststrips weg na de datum die u op de flacon heeft geschreven.
- Knoei niet met de teststrips.

Glucose teststrips

De Nova Vet Glucose Test Strips zijn ontworpen voor gebruik met uw Nova Vet-systeem voor bloedketonen- en glucosecontrole. Gebruik elke teststrip slechts eenmaal en gooi hem daarna weg. NIET opnieuw bloed aanbrengen op de teststrip.

- Vereist een zeer klein bloedvolume: 0,4 µL (glucose)
- Zuigt automatisch bloed op in het testgebied van de strip
- Kan met schone, droge handen worden gehanteerd zonder de metingen te beïnvloeden



Belangrijke informatie over Nova Vet Glucose Test Strips

- Gebruik alleen Nova Vet Glucose Test Strips bij het testen op glucose.
- Haal de teststrip alleen uit de flacon als u klaar bent om te testen.
- Bewaar de teststripverpakking op een koele, droge plaats onder 30°C. Niet koelen of invriezen.

- Niet in de buurt van warmte of vocht bewaren.
- Bewaar de teststrips uitsluitend in de originele flacon.
- Nadat u een teststrip uit de flacon heeft gehaald, moet u onmiddellijk de dop op de flacon en sluit deze goed af.
- Gebruik de teststrips niet na de op de verpakking de verpakking, omdat dit tot onnauwkeurige resultaten kan leiden.
- Teststrips mogen niet langer dan 3 maanden na opening worden bewaard. de flacon. Wanneer u een nieuwe flacon met teststrips voor het eerst opent, tel dan 3 maanden vooruit en schrijf die datum op de flacon. Gooi alle Gooi de overgebleven teststrips weg na de datum die u op de flacon heeft geschreven.
- Knoei niet met de teststrips.

De tijd, datum en pieper instellen

Het is belangrijk om de juiste tijd en datum in te stellen zodat je gegevens hebt over wanneer u hebt getest.

Uw Nova Vet-monitoringsysteem heeft een pieperfunctie die vooraf is ingesteld op "aan". Dit vertelt u wanneer er voldoende bloed is aangebracht op de teststrip is aangebracht, wanneer de test is voltooid, en wijst u op andere andere stappen in het gebruik van uw monitor.


NB: Vergeet niet de tijd- en datuminstellingen aan te passen om aan de plaatselijke tijd of zomertijd en nadat u de batterij hebt vervangen. De batterij hebt vervangen. Nadat u een test hebt voltooid, zal het laatste resultaat verschijnen wanneer u het monitoringsysteem de volgende keer inschakelt. De weergegeven datum en tijd is de datum en tijd van uw vorige testresultaat, niet de huidige datum en tijd.

De tijd, datum en pieper instellen

1. Druk de MODE knop langer dan 3 seconden. De monitor, indien in slaapstand, ontwaakt wakker, toont alle segmenten gedurende 3 seconden, en gaat naar de SETUP-modus.



Hierdoor komt de monitor in het eerste instelscherm: Tijd.

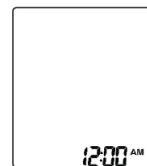

2. Druk herhaaldelijk op de MODE-toets om de MODE te vinden die u wilt wijzigen.

3. Druk op de links/rechts pijltjestoetsen om een nieuwe instelling voor die MODE te kiezen.

4. Druk op de MODE knop om de nieuwe instellingen te selecteren of om naar de volgende MODE te gaan.

MODI SCHERMWEERGAVE

Uur (knipperend) "10":00"AM"

Minuten (Knipperend) 10:"55"AM

Jaar (knipperen) 12-28 "2013".

Maand (knipperen) "12"-28 2013

Dag (knipperen) 12-"28" 2013


Pieptoon (AAN of UIT) "AAN".

Steekproefmarkering (AAN of UIT) "AAN"

De Keton Helling instellen

Stel de helling voor Keton in:

Druk op de toetsen links/rechts om de hellingwaarde te verlagen/verhogen in stappen van 0,01. De standaardwaarde is 1,00 en het bereik is 0,50 tot 1,50.

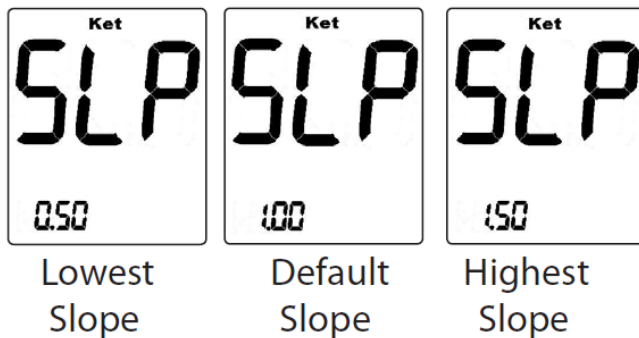

BELANGRIJK: Indien

Indien nodig, neem contact op met

Technische Ondersteuning voor

advies over het wijzigen van

de waarde van de ketoncurve

van de 1,00 standaard

instelling. Deze wijziging

wijzigt het gerapporteerde ketonresultaat voor monsters van volbloed


alleen. Kwaliteitscontrolespecimens, die als

controle zijn aangemerkt, worden niet beïnvloed door deze wijziging. beïnvloed door deze verandering.

Instellen van de Keton Interceptie

Stel de Intercept voor Keton in:

Druk op de toetsen links/rechts om de Intercept-waarde te verlagen/verhogen in stappen van 0,1. De standaardwaarde is 0,0 en het bereik is -1,0 tot 1,0.

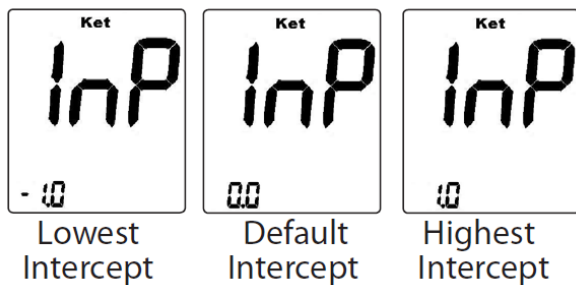

BELANGRIJK: Indien

Indien nodig, neem contact op met

Technische Ondersteuning voor

advies over het wijzigen van

de keton interceptie

waarde van de 0,0

standaardinstelling. Deze

wijziging wijzigt het gerapporteerde ketonresultaat

voor volbloedmonsters.

specimens. Monsters voor kwaliteitscontrole,

aangeduid als controle, worden door deze wijziging niet beïnvloed.

END (Einde Setup Modus) "END".

Lopende Controle Oplossing

Controle oplossing

Nova Max Plus Glucose en Keton Controle Oplossing is een vloeistof die een vaste hoeveelheid glucose en ketonen bevat.

- Gebruik deze oplossingen om te controleren of uw controlesysteem en teststrips goed werken.

- Gebruik deze oplossing om te oefenen of om te controleren of u de juiste testprocedure volgt zonder bloed te gebruiken.

de juiste testprocedure volgt zonder bloed te gebruiken.

Als de meting van het monitoringsysteem binnen het aanvaardbare bereik van de controleoplossing ligt, werkt de monitor naar behoren.

aanvaardbaar bereik ligt, werkt de monitor naar behoren.

Voer een controlevloeistoftest uit

De controlevloeistoftest bevestigt dat uw monitor en teststrips correct werken.

strips correct werken. Een test met controlevloeistof is vergelijkbaar met een

bloedtest, behalve dat u Nova Max Plus controlevloeistof gebruikt en

en niet een bloedmonster.

U moet een controlevloeistoftest uitvoeren:

- Wanneer u het monitoringsysteem voor het eerst krijgt

- Telkens wanneer u een nieuw flesje teststrips opent en in gebruik neemt.

- Als u de dop van het flesje met glucoseteststrips open laat gedurende tijd open laat staan

- Als het monitoringsysteem is gevallen, beschadigd of blootgesteld aan aan vloeistoffen

- Om de werking van het monitoringsysteem en de teststrips

Ketonbeheersingsoplossing gebruiken

Belangrijke informatie voor Keton Controle Oplossing

- Gebruik voor de test uitsluitend Nova Max Plus-controleoplossingen.

- Controleer de vervaldatum op het flesje met de controleoplossing. Doe

Gebruik de controlevloeistof niet na de vervaldatum, anders kunt u

onnauwkeurige resultaten krijgen.

- Alleen bewaren tot 3 maanden na eerste opening. Wanneer u een nieuw een nieuw flesje controlevloeistof opent, telt u 3 maanden vooruit en

schrijf die datum op het etiket van het flesje controlevloeistof. Gooi weg de resterende oplossing na de datum die u op het flesje

op het flesje.

- Bewaar de controlevloeistof goed afgesloten bij kamertemperatuur onder 30°C. Niet koelen of invriezen.
- Schud de controleoplossing goed voor gebruik.

Let op: Het op het etiket van de teststrook afgedrukte bereik van de controlevloeistof label is alleen voor de controleoplossing. Het wordt gebruikt om de prestaties te testen van het monitoringsysteem en de teststrip.

Als de testresultaten van uw controlevloeistof buiten het bereik vallen dat is afgedrukt op het etiket van de teststrook:

- Het Keton teststripflesje werkt mogelijk niet goed.
- Neem contact op met Nova Technical Support of uw plaatselijke leverancier.

Testen van een Keton-kwaliteitscontroleoplossing

1. Plaats een teststrip in het monitoringsysteem. Als het systeem was uitgeschakeld, geeft het scherm gedurende 2 seconden alle segmenten weer daarna verschijnen het knipperende bloeddruppelsymbool en "Ket".

NB: Als de strook wordt verwijderd voordat u de test start, blijft het scherm leeg. wordt het scherm leeg.

2. Druk op de links/rechts-toetsen om aan te geven dat dit monster een controle is. (CTL wordt weergegeven op het display).

OPMERKING: Het is belangrijk om de test van de controlevloeistof te selecteren zodat het testresultaat niet een van de bloedtestresultaten lijkt te zijn.

NB: Als een test niet binnen 2 minuten na het inbrengen van de teststrook wordt uitgevoerd, gaat het scherm uit.

van de teststrip, wordt het scherm leeg. Om een test uit te voeren, neemt u de teststrip uit en plaatst u deze terug, beginnend bij stap 1.

3. Schud de flacon met controlevloeistof. Gooi een druppel weg voor gebruik. Knijp een druppel controleoplossing op een schoon, hard, droog oppervlak, d.w.z. een controledopje.
4. Pak het monitoringsysteem op met de teststrip geplaatst en raak de teststrook aan met de oplossing.



OPMERKING: Het controlesymbool op het scherm knippert herhaaldelijk aan en uit totdat er voldoende controlevloeistof aan de teststrook is toegevoegd. strook. (Pieper klinkt indien ingeschakeld.)

5. Het resultaat van de Keton-kwaliteitstest is binnen 10 seconden op het scherm beschikbaar. 10 seconden op het scherm. Het scherm telt af van 10 naar 1.

6. Vergelijk het resultaat op het scherm met het bereik dat is afgedrukt op het etiket van de teststrook. Als het resultaat binnen het bereik valt, werken uw monitoringsysteem en teststrips correct.

7. Het resultaat wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.

8. Als het resultaat van de ketontest hoger is dan 8 mmol/L voor keton, wordt op het scherm HI met Ket weergegeven.

Resultaten buiten het bereik kunnen worden veroorzaakt door het volgende:

- Een fout bij het uitvoeren van de controletest, hertest en volg de instructies zorgvuldig op.
- De controlevloeistof kan verlopen of verontreinigd zijn.

Controleer de vervaldatum op het flesje met de controlevloeistof flesje. De controlevloeistof is slechts 3 maanden houdbaar na opening.

Zorg ervoor dat het flesje met de controleoplossing gesloten is wanneer het niet wordt gebruikt.

- Verlopen teststrip - Controleer de vervaldatum op het zakje teststrips.
stripzakje.

- De teststrip kan beschadigd zijn. Dit kan worden veroorzaakt door extreme temperaturen of door de dop van het flesje met de teststrip open te laten staan.
open laten staan. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.

- Storing in het monitoringsysteem - het monitoringsysteem kan werkt mogelijk niet goed.

Een bloedtest op ketonen uitvoeren

NB: Als het testresultaat van de controlevloeistof buiten het bereik valt (hoger of lager is), kunnen uw monitoringsysteem en teststrip

hoger of lager is), kunnen uw monitoringsysteem en teststrook niet als systeem werken. Herhaal het proces met een nieuwe

strook. Gebruik de monitor niet totdat de testresultaten binnen het juiste bereik vallen.

bereik vallen. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de leverancier van Nova.

Een bloedtest op ketonen uitvoeren

1. Neem een geschikt bloedmonster van een dier in een spuit.

2. Plaats een Keton-teststrip in het monitoringsysteem.

Keton is een groene strook. Als het monitoringsysteem was uitgeschakeld, geeft het scherm alle segmenten gedurende 2 seconden.

NB: Als de strook wordt verwijderd voordat u de test start, blijft het scherm leeg.
wordt het scherm leeg.

Een bloedtest op ketonen uitvoeren



3. Na 3 seconden verschijnt het knipperende bloeddruppelsymbool met "Ket" op de display.

NB: Als een test niet binnen 2 minuten na het inbrengen van de teststrook wordt uitgevoerd, wordt het scherm leeg.


van de teststrip, wordt het scherm leeg. Om een test uit te voeren, neemt u

en vervangt u de teststrip vanaf stap 1.

4. Raak het uiteinde van de teststrip aan met een bloed monster (verzameld in een injectiespuit) tot de teststrip vol is en het aftellen op het scherm afloopt.

strip vol is en de aftelklok op het scherm begint.

timer op het scherm begint. (Pieper klinkt indien ingeschakeld.)

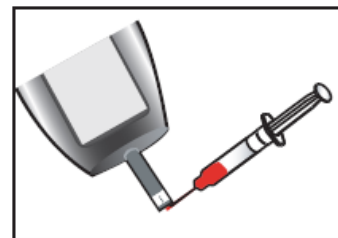

OPMERKING: Het bloeddruppelsymbool knippert herhaaldelijk aan en uit totdat er voldoende bloed aan de teststrook is toegevoegd.

5. Er verschijnt een aftelling op het scherm terwijl de test bezig is. A

resultaat is na 10 seconden beschikbaar op het scherm.

6. Het resultaat wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.

7. Als het testresultaat hoger is dan 8,0 mmol/L voor Keton, geeft het scherm HI met Ket weergegeven.

Als het testresultaat lager is dan 0,1 mmol/L voor Keton, toont het scherm scherm LO met Ket weergave.


OPMERKING: Het monitoringsysteem gaat na 2 minuten uit. niet-gebruik of als de strip wordt verwijderd. De toetsen zijn uitgeschakeld totdat een strook wordt geplaatst. Resultaten en markeringsstatus worden opgeslagen als de monitor time-out, de strip wordt verwijderd of de monitor wordt uitgeschakeld.

Resultaten Ketonentest


Het resultaat van de bloedketontest wordt weergegeven op de monitor.



Als het testresultaat hoger is dan 8,0 mmol/L (Ket), geeft de monitor "HI".

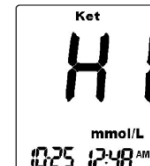

Als het testresultaat lager is dan 0,1 mmol/L (Ket), toont de monitor "LO". Er is geen actie nodig.

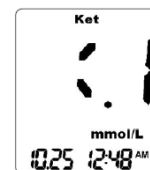

Glucose Controle Oplossing

Belangrijke informatie voor Glucose Controle Oplossing

- Gebruik voor de test uitsluitend Nova Max Plus Glucose Controle Oplossingen.
- Controleer de vervaldatum op het flesje met de controleoplossing. Doe Gebruik de controlevloeistof niet na de vervaldatum, anders kunt u onnauwkeurige resultaten krijgen.
- Uitsluitend 3 maanden na eerste opening bewaren. Wanneer u een nieuw een nieuw flesje controlevloeistof opent, telt u 3 maanden vooruit en schrijf die datum op het etiket van het flesje controlevloeistof. Gooi weg de resterende oplossing na de datum die u op het flesje op het flesje.
- Bewaar de controlevloeistof goed afgesloten bij kamertemperatuur onder 30°C. Niet koelen of invriezen.
- Schud de controleoplossing goed voor gebruik.

Let op: Het op het glucosetestflesje afgedrukte bereik van de controlevloeistof strook is alleen voor de controleoplossing. Het wordt gebruikt om de werking van de meter en de teststrook.

Als de testresultaten van uw controlevloeistof buiten het op het flesje op de teststripflacon:

- De glucose teststrip flacon werkt mogelijk niet goed.
- Neem contact op met Nova Technical Support of uw plaatselijke leverancier.

Een glucosecontroleoplossing testen

1. Plaats een glucoseteststrip in het monitoringsysteem. Als monitor was uitgeschakeld, geeft het scherm gedurende 2 seconden alle segmenten weer daarna verschijnen het knipperende bloeddruppelsymbool en "Glu".

OPMERKING: Als de strook wordt verwijderd voordat u de test start, gaat het scherm wordt het scherm leeg.

2. Druk op de links/rechts-toetsen om aan te geven dat dit monster een controle is. (CTL wordt weergegeven op het display).

OPMERKING: Het is belangrijk om de test van de controlevloeistof te selecteren zodat het testresultaat niet lijkt op een van uw bloedtestresultaten.

OPMERKING: Als een test niet binnen 2 minuten wordt uitgevoerd na het inbrengen van de teststrip, blijft het scherm leeg. leeg. Om een test uit te voeren, neemt u de teststrip terug, te beginnen bij stap 1.

3. Schud de flacon met controlevloeistof. Gooi een druppel weg voor gebruik. Knijp een druppel controleoplossing op een schoon, hard en droog oppervlak, d.w.z. een controledopje.



4. Neem het monitoringsysteem op met de teststrip erin en raak de teststrook aan op de druppel controlevloeistof.

OPMERKING: Het controlesymbool op het scherm knippert herhaaldelijk aan en uit totdat er voldoende controlevloeistof aan de teststrip is toegevoegd. strook. (Pieper klinkt indien ingeschakeld).

5. Een resultaat van de glucose kwaliteitscontrole test is beschikbaar op het scherm in 4 seconden op het scherm. Het scherm telt af van 4 naar 1.

6. Vergelijk het resultaat op het scherm met het bereik dat op de teststrook op het flesje teststrips. Als het resultaat binnen het bereik valt, werken uw monitor en de teststrips correct.

7. Het resultaat wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.

8. Als het testresultaat hoger is dan 600 mg/dL of 33,3 mmol/L voor glucose, verschijnt op het scherm HI met Glu.

Als het testresultaat lager is dan 20 mg/dL of 1,1 mmol/L voor glucose, verschijnt LO op het scherm.

Resultaten buiten het bereik kunnen worden veroorzaakt door het volgende:

- Een fout bij het uitvoeren van de controletest, doe een nieuwe test en volg de instructies zorgvuldig op.

- De controlevloeistof kan verlopen of verontreinigd zijn.

Controleer de vervaldatum op het flesje met de controleoplossing.

flesje. De controlevloeistof is slechts 3 maanden houdbaar na opening.

Zorg ervoor dat het flesje met de controleoplossing gesloten is wanneer het niet wordt gebruikt.

- Verlopen teststrip - Controleer de vervaldatum op het flesje met de teststrip. stripflesje.

- De teststrip kan beschadigd zijn. Dit kan worden veroorzaakt door extreme temperaturen of door de dop van de teststrip open te laten staan. open laten staan. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.

- Storing in de monitor - het monitoringsysteem werkt mogelijk niet goed. niet goed werken.

NB: Als het testresultaat van de controlevloeistof buiten het bereik valt (hoger of lager is), kunnen uw monitoringsysteem en de teststrip

hoger of lager is), werken het monitoringsysteem en de teststrip mogelijk niet als systeem. niet als systeem werken. Herhaal het proces met een nieuwe strook.

Gebruik het monitoringsysteem niet totdat de testresultaten binnen het juiste bereik vallen.

het juiste bereik vallen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Nova Technical Support of uw plaatselijke leverancier.

Lopende Glucose Bloedtest

1. Neem een geschikt bloedmonster van een dier in een spuit.

NB: Reiniging van de prikplaats is belangrijk.

2. Plaats een glucoseteststrip in het monitoringsysteem. Glucose is een blauwe strook. Als de monitor uit stond, geeft het scherm alle segmenten gedurende 2 seconden.

OPMERKING: Als de strook wordt verwijderd voordat u de test start, blijft het scherm leeg. wordt het scherm leeg.



3. Na 3 seconden verschijnt het knipperende bloeddruppelsymbool met "Glu" op het scherm.

NB: Als een test niet binnen 2 minuten na het inbrengen van de teststrip wordt uitgevoerd, wordt het scherm leeg.

van de teststrip, wordt het scherm leeg. Om een test uit te voeren, neemt u en vervangt u de teststrip vanaf stap 2.

4. Raak het uiteinde van de teststrip aan met een bloed monster (verzameld in een injectiespuit) tot de teststrip vol is en het aftellen op het scherm afloopt.

strip vol is en de aftelklok op het scherm begint.


timer op het scherm begint. (Pieper klinkt indien ingeschakeld.)

NB: Het bloeddruppelsymbool knippert herhaaldelijk aan en uit totdat

voldoende bloed aan de teststrook is toegevoegd.

5. Er verschijnt een aftelling op het scherm terwijl de test bezig is. A resultaat is na 4 seconden beschikbaar op het scherm.

6. Het resultaat wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.

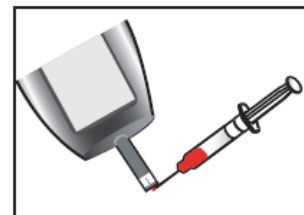

7. Als het testresultaat hoger is dan 600 mg/dL of 33,3 mmol/L voor Glucose, geeft het scherm HI weer.

Als het testresultaat lager is dan 20 mg/dL of 1,1 mmol/L voor Glucose, geeft het scherm LO weer.

OPMERKING: Het monitoringsysteem gaat na 2 minuten uit.

niet gebruikt of als de strook wordt verwijderd. De toetsen zijn uitgeschakeld totdat een strook is geplaatst. Resultaten en markeringsstatus worden opgeslagen als de monitor time-out, de strook wordt verwijderd, of het monitoringsysteem wordt uitgeschakeld.


OPMERKING: Druk de teststrook niet rechtstreeks tegen de bloedafnameplaats aan. plaats. Druk de teststrip voorzichtig op het bloedmonster met behulp van een spuit.

Het resultaat van de bloedglucosetest wordt weergegeven op het monitoringsysteem.

Voorbeeldschermen zijn in mg/dL.




Als het testresultaat hoger is dan 600 mg/dL of 33,3 mmol/L, geeft de monitor "HI" weer.

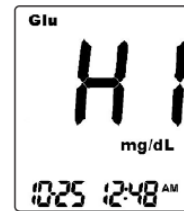

Als het testresultaat lager is dan 20 mg/dL of 1,1 mmol/L, geeft de monitor "LO" aan.

Als u een foutmelding ontvangt, zie Displays, Betekenissen, Acties van deze gebruiksaanwijzing.

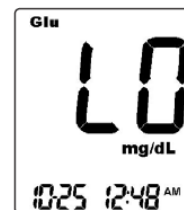

Testresultaten in het geheugen bekijken


NB: Als een teststrip wordt ingebracht terwijl u in de modus Gegevensoverzicht bent, schakelt het monitoringsysteem onmiddellijk over naar de testmodus.

Om testresultaten te bekijken die in het geheugen zijn opgeslagen, begint u met de monitor uit. De monitor staat in de uit als het scherm volledig leeg is. Om de monitor uit te schakelen, houdt u de Modusknop ingedrukt totdat het scherm leeg is en laat dan de knop los.

1. Terwijl de monitor is uitgeschakeld, drukt u op de modusknop. Het meest recente testresultaat zou moeten verschijnen. Als er GEEN resultaten in het geheugen zijn, geeft het scherm 3 streepjes weer.

2. Druk op de Links/Rechts-toets om alle gegevens in het geheugen te bekijken. De linker pijl gaat terug in de tijd en de De pijl naar rechts gaat vooruit in de tijd. Alle resultaten inclusief controleresultaten, gemarkeerde resultaten en ongemarkeerde resultaten kunnen worden bekeken.

3. Aan het einde van het bekijken van individuele testresultaten, toont het scherm "Einde Mem."

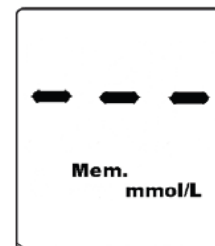

OPMERKING: Als het geheugen van de monitor vol is (400 test resultaten), zal elk nieuw testresultaat in het geheugen het oudste in het geheugen opgeslagen testresultaat verwijderen.

OPMERKING: Voor gegevensgemiddelden worden alleen glucoseresultaten gemiddeld. HI glucose resultaten zijn gelijk aan 600 mg/dL of 33.3 mmol/L en LO resultaten zijn gelijk aan 20 mg/dL of 1,1 mmol/L.




4. Om de gemiddelde resultaten van 1 dag, 7 dagen, 14 dagen en 30 dagen te bekijken, drukt u op de knop Modus.



5. Als er minder dan 2 testresultaten in het geheugen zitten, toont het scherm 000. Als er geen resultaten zijn, geeft het scherm 3 streepjes weer.

Example screens are in mg/dL.

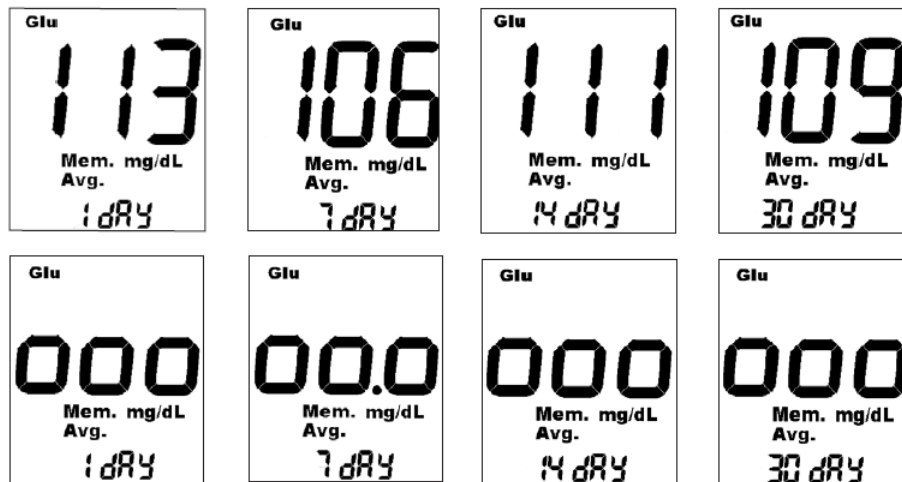


Testresultaten in het geheugen bekijken

6. Na het bekijken van het 30 dagen gemiddelde, druk op de Mode knop om de monitor uit te schakelen, of druk op geen enkele knop en de monitor na 30 seconden automatisch uit.

Basis onderhoud


Batterij controleren

De monitor wordt gevoed door één enkele knoopcelbatterij, CR2450 (3V). Bij de eerste weergave van het batterijpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm en de bloeddruppel in de linker benedenhoek van het scherm heeft de monitor voldoende lading voor nog 20 tests. Ga door met testen zoals gewoonlijk; de batterij-indicator zal blijft op het scherm.

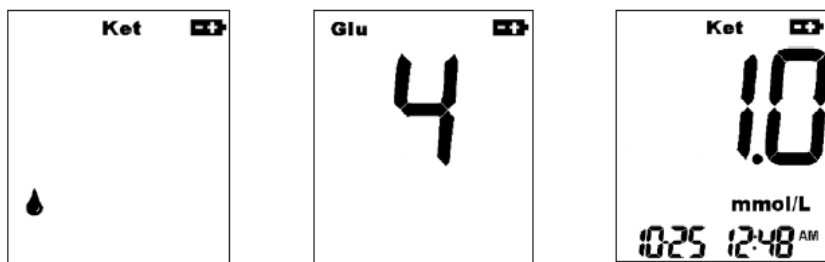

Nadat 20 tests zijn uitgevoerd, is er onvoldoende batterij onvoldoende geladen om de tests voort te zetten, en zal de monitor niet langer werken totdat de batterij is vervangen. Het batterijpictogram verschijnt verschijnt alleen wanneer een strook is geplaatst en het pictogram verdwijnt wanneer de strook wordt verwijderd. wanneer de strip wordt verwijderd.


Battery low

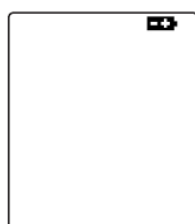

Vervanging van de batterij

Vervang de batterij als volgt:

1. Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de monitor.
2. Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe met de + kant naar boven.
3. Plaats het deksel terug.

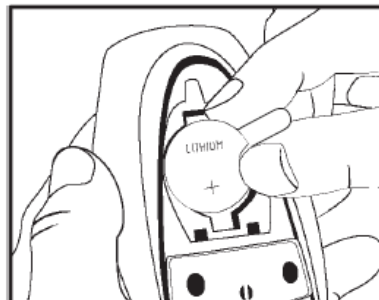

OPMERKING: Nadat de batterij is vervangen, geeft de monitor het alle alle segmenten weer. Daarna geeft de monitor de ingestelde tijd weer. Reset naar de huidige tijd en datum. Ga indien nodig naar het hoofdstuk "De Time, Date, and Beeper" hoofdstuk in deze handleiding. Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke milieuvoorschriften.

Reiniging en onderhoud

De buitenkant van het Nova Vet monitoringsysteem mag alleen worden gereinigd worden met alcoholdoekjes. Voorkom dat vloeistoffen in de de teststrip-poort of de knoppen Links, Rechts en Modus.

WAARSCHUWING: Probeer de monitor NIET te openen om reparaties uit te voeren. reparaties uit te voeren. Uw garantie en alle claims komen te vervallen! Alleen erkend onderhoudspersoneel kan de monitor repareren. Als de monitor gerepareerd of vervangen moet worden, neem dan contact op met Nova Technical Support of uw plaatselijke leverancier.

Displays, betekenissen, acties

Dit hoofdstuk behandelt de berichten die op uw displays verschijnen, wat ze betekenen en welke actie u moet ondernemen.

Glucoseschermen worden weergegeven in mg/dL, maar kunnen worden weergegeven in mmol/L, afhankelijk van de monitor die u hebt aangeschaft.

Display




Wat het betekent

Systeemcontrole. Controleert of alle segmenten werken.
Verschijnt wanneer:
- De monitor is ingeschakeld voor Setup en Memory Controle.
- De teststrook in de de monitor.

Wat te doen


Geen actie vereist.
Als alle segmenten niet op de monitor worden weergegeven, neem dan contact op met Nova Technical Support of uw plaatselijke leverancier.

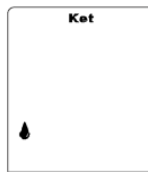Display**Wat het betekent**

Bloeddruppel symbool:
De monitor is klaar om
bloed.

Wat te doen

Breng een bloedmonster aan
op de teststrook. Zie
pagina 18 of pagina 28.

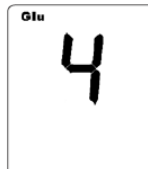

Aftelscherm: 4
seconden voor glucose en
10 seconden voor Keton om
het testresultaat te berekenen.

Geen actie vereist.



Het resultaat van een
bloedglucosetest
is in mg/dL of mmol/L.


Geen actie vereist. Resultaat
wordt automatisch opgeslagen
in het geheugen.

Display

Een bloed Keton test resultaat
in mmol/L.


Wat te doen

Geen actie nodig. Resultaat
wordt automatisch opgeslagen
in het geheugen.

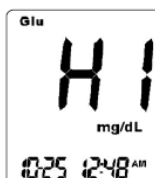


De bloedglucosewaarde
is hoger dan 600 mg/dL
of 33,3 mmol/L.

Volg de standaard veterinaire
protocollen.

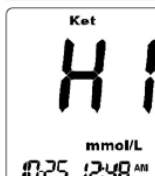


De bloedketonwaarde is
is hoger dan 8 mmol/L.

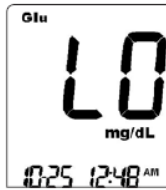Display**Wat het betekent**

De bloedglucosewaarde is lager dan 20 mg/dL of 1,1 mmol/L.

Wat te doen

Volg de standaard veterinaire protocollen.

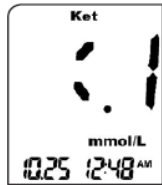

De bloedketonwaarde is lager dan 0,1 mmol/L.

Geen actie nodig.



Een bloedglucosetest resultaat in mg/dL of mmol/L opgeslagen in het geheugen met datum/tijd.

Geen actie vereist.

Display

Een bloedketon testresultaat in mmol/L opgeslagen in het geheugen van de monitor met datum/tijd.

Geen actie vereist.



Einde instelling of geheugen Herzien.

Geen actie vereist.



Het gemiddelde van alle glucosetestresultaten van de in de afgelopen 24 uur.

Geen actie vereist.
Alleen glucose

Display

Wat het betekent

Wat te doen




Geen testresultaten in de laatste 24 uur.

Geen actie nodig.
Alleen glucose



Het gemiddelde van alle bloed glucose testresultaten genomen in de afgelopen 7 dagen.

Geen actie nodig.
Alleen glucose

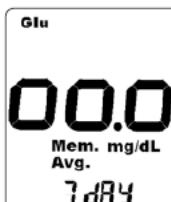

Geen testresultaten in de afgelopen 7 dagen.

Geen actie nodig.
Alleen glucose

Display

Wat het betekent

Wat te doen



Het gemiddelde van alle bloed glucose testresultaten genomen in de afgelopen 14 dagen.

Geen actie nodig.
Alleen glucose



Geen testresultaten in de afgelopen 14 dagen.

Geen actie nodig.
Alleen glucose



Het gemiddelde van alle bloed glucosetestresultaten van de in de afgelopen 30 dagen.

Geen actie nodig.
Alleen glucose

Display

Wat het betekent

Wat te doen




Geen testresultaten in de laatste 30 dagen.

Geen actie nodig.
Alleen glucose



Er zijn GEEN resultaten in geheugen.

Geen actie nodig.

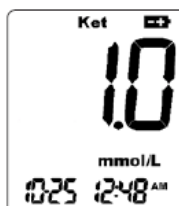

De batterij raakt leeg, maar u kunt nog steeds een test uitvoeren. Batterij verschijnt op alle schermen.

We stellen voor dat u de batterij onmiddellijk vervangt. Er is slechts genoeg vermogen om 20 tests uit te voeren.

Display


Wat het betekent

Wat te doen



Een Glucose Controle Oplossing testresultaat.

Geen actie nodig.

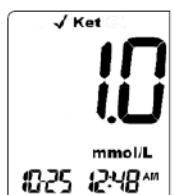

Een gemarkeerd Ketonmonster testresultaat.

Geen actie nodig.



Softwarefout

Neem contact op met Nova Technical Support of uw lokale leverancier.

Display**Wat het betekent****Wat te doen**

Systeemhardwarefout

Neem contact op met Nova Technical Ondersteuning of uw plaatselijke leverancier.



Bedrijfstemperatuur Fout

Monitor is buiten de vereiste testtemperatuur bereik van 23 tot 113°F (-5 tot 45°C). Verplaats de monitor naar een warmere of koelere ruimte en wacht een paar minuten.

Display**Wat het betekent****Wat te doen**

Used Strip Error: Gebruikte of beschadigde strook.

Doe een nieuwe test met een nieuwe strip.



Fout bloedmonster

Verkeerde toepassing van bloedmonster of controle oplossing op de teststrook strip, of de teststrip kan beschadigd. Herzie uw bemonsteringstechniek.

Display**Wat het betekent****Wat te doen**

Monitor doet gaat niet aan na het plaatsen van een test strook.

- De teststrip is op de ondersteboven of niet helemaal in.
- De batterij is leeg.
- De batterij is verkeerd geplaatst verkeerd geïnstalleerd of er is geen batterij in de monitor.

Plaats de teststrip correct met de naam Nova en de witte punt naar boven en naar buiten.

Plaats de batterij terug.

Controleer of de batterij correct geïnstalleerd is met het "+" teken naar u toe is gericht. Neem contact op met Nova Technical Support of uw plaatselijke leverancier.

Display	Wat het betekent	Wat te doen
Monitor niet begint test aftellen na toepassing van een bloed monster.	- Niet genoeg bloed monster. - Monster aangebracht na monitor automatisch uitgeschakeld. - De teststrook kan beschadigd. - De monitor kan niet goed werken.	Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Neem na 3 pogingen contact op met Nova Technical Support of uw plaatselijke leverancier.

Bijlage

Specificaties

Gemeten test Bloedglucose en ketonen
 Glucose Methodologie Glucose dehydrogenase (GHD-FAD) biosensor
 Keton Methodologie β -hydroxybutyraat dehydrogenase biosensor
 Glucosetestresultaten mg/dL of mmol/L (plasmawaarden)
 Resultaten ketontest mmol/L (plasmawaarden)
 Type monster Volbloed
 Glucose Testbereik 20 tot 600 mg/dL
 1,1 tot 33,3 mmol/L
 Keton Test bereik 0,1 tot 8,0 mmol/L
 Aanvaardbaar Hematocriet bereik 25% tot 60%
 Duur van de test 4 seconden (Glu), 10 seconden (Ket)
 Volume teststrips 0,4 μ L (Glu), 0,8 μ L (Ket)
 Levensduur batterij (nominaal) 1000 testen
 Batterijduur laag Ongeveer 20 testen
 Werkingsbereiken
 Temperatuur 23 tot 113°F (-5 tot 45°C)
 Vochtigheid 10% tot 90% relatieve vochtigheid
 Hoogte tot 3000 m
 Gewicht 2,65 lb (75 g)
 Afmetingen 3,6 x 2,3 x 0,9 in
 (91,4 x 58,4 x 22,9 mm)
 Monitorgegevensopslag 400 Resultaten

Chemiemeting

Onnauwkeurigheid glucosetest
 6% of 5,4 mg/dL of 0,3 mmol/L
 (wat het grootste is)
 Onnauwkeurigheid ketonentest
 6% of 0,15 mmol/L (de hoogste van de twee)

Beperkingen

De Nova Vet-teststrips geven nauwkeurige resultaten wanneer de volgende beperkingen in acht worden genomen:
 - Elke teststrip is voor eenmalig gebruik.

- Uw teststrips zijn uitsluitend bestemd voor diergeneeskundig gebruik. NIET GEBRUIKEN BIJ MENSEN.
- Gebruik alleen vers volbloed. Gebruik geen serum of plasma.
- Er is geen effect op de bloedglucose- of ketonwaarden voor hoogten tot 3000 meter boven zeeniveau.
- Extreem hoge luchtvochtigheid (hoger dan 90% en lager dan 10%) kunnen de resultaten beïnvloeden.
- Het antistollingsmiddel natrium- en lithiumheparine kan worden gebruikt. Het gebruik van EDTA wordt afgeraden.

Instructies

1. Als de teststrip in de instelmodus wordt geplaatst, slaat de monitor alle tot dan toe ingevoerde waarden opslaan en onmiddellijk over naar de testmodus. Bij het verlaten van de testmodus wordt het scherm leeg en keert niet terug naar de instelmodus.
2. Indien in de modus Gegevensherziening wanneer de teststrook wordt ingebracht, schakelt de monitor onmiddellijk over naar de testmodus. Bij het verlaten van testmodus wordt het monitorscherm leeg en keert niet terug naar de instelmodus.

terug naar de modus Gegevensoverzicht.

3. Het pictogram Batterij bijna leeg wordt in elke modus weergegeven, behalve bij Setup.
4. Zodra het batterijniveau onder de drempel komt die de waarschuwing "batterij bijna leeg"-waarschuwing, blijft het de waarschuwing geven totdat de monitor onbruikbaar wordt omdat de batterij bijna leeg is.

5. De monitor reageert op het indrukken en vasthouden van toetsen:
Links/Rechts toetsen

- De Links/Rechts-toets gaat vooruit/achteruit door een reeks opgeslagen schermen met testresultaten of stappen van waarde.
- Houd de toets Links/Rechts ingedrukt om het scherm sneller te veranderen. te versnellen.

Knop MODE

- Wanneer de MODE-knop minder dan 1,5 seconden wordt ingedrukt om naar de volgende functie te gaan, gaat de monitor onmiddellijk onmiddellijk naar het volgende scherm wanneer u op de knop drukt.
 - Als de monitor in de slaapstand staat (OFF) en u drukt minder dan 1,5 seconden op de MODE-knop minder dan 1,5 seconden ingedrukt wordt, ontwaakt de monitor en komt de gegevensweergavemodus binnen.
 - Wanneer de monitor in de slaapstand (UIT) staat en u drukt op de MODE-knop langer dan 3,0 seconden ingedrukt, wordt de monitor en gaat naar de instelmodus.
 - Als de monitor wakker is (ON) en u drukt langer dan 1,5 seconden op de MODE-knop langer dan 1,5 seconden handmatig indrukken van de MODE-knop de monitor uit (slaapstand). (slaapstand).
6. Als er geen activiteit is, treedt er na de volgende tijden een time-out op:
 - 1 minuut voor alle schermen
 - 2 minuten tijdens de testmodus

Garantie

Uw Nova Vet-systeem voor bloedketonen- en glucosecontrole is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum (behalve zoals hieronder vermeld). Indien op enig moment gedurende de eerste 2 jaar na aankoop uw Nova Vet bloedketon- en glucosecontrolesysteem om welke reden dan ook niet werkt (anders dan hieronder beschreven). enige reden (anders dan hieronder beschreven), zal het worden vervangen door een nieuwe monitor, of een wezenlijk equivalent daarvan, kosteloos vervangen.

Garantiebeperkingen: Voor deze garantie gelden de volgende uitzonderingen en beperkingen:

1. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper.
2. Deze garantie is niet van toepassing op eenheden die slecht functioneren of beschadigd zijn door duidelijk misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, verwaarlozing, ongeoorloofd onderhoud of het niet bedienen de instructies.
3. Wij hebben geen kennis van de prestaties van het Nova Vet bloedketon- en glucosecontrolesysteem bij gebruik met andere teststrips dan de Nova Vet teststrips. Daarom geen garantie voor de werking van het Nova Vet Bloed Keton- en Glucosecontrolesysteem bij gebruik met andere teststrips dan Nova Vet-teststrips. andere teststrips dan Nova Vet Test Strips.
4. Er is geen andere uitdrukkelijke garantie voor dit product. De optie van vervanging, zoals hierboven beschreven, is de garantiegever enige verplichting van de garantiegever onder deze garantie.

Voor garantieservice:

In de VS of Canada, bel 1-800-545-6682.

Neem buiten de VS en Canada contact op met uw plaatselijke Nova Vet-leverancier.