

1609932

MS Smartscan Wireless 1.0

Dit product is een handheld software-gecontroleerde veterinaire scanner. Er worden realtime ultrasone signalen, via WIFI verkregen. Deze signalen worden op Android-apparaten zoals smartphones of tablet-pc's weergegeven.

De Smartscan wordt geleverd in een koffer met een **draadloze** sonde, welke middels WIFI kan communiceren met het meegeleverde tablet. Deze scanner is enkel te gebruiken voor het testen op drachtigheid. Door het draadloze systeem kan men makkelijker op moeilijk bereikbare plekken komen.

Met een eenvoudig druk op de knop kunnen schermafbeeldingen worden gemaakt, of een video van de scan van het moederdier. De tablet kan middels de meegeleverde polsband op de onderarm gedragen worden of men kan desgewenst de draagriem voor om de hals gebruiken.



1609931

MS Smartscan Wireless 2.0

Naast het testen op drachtigheid kan de sonde ook worden gebruikt om de spekdikte te meten

1609930

MS Smartscan Wireless 3.0

Deze is uitgevoerd met een RFID module welke het scannen van een transponder mogelijk maakt, om zodoende snel de gegevens van het dier te kunnen opslaan.

Kenmerken	Wireless 1.0	Wireless 2.0	Wireless 3.0
Frequentie 3.5 mhz	X	X	X
Dieptecontrole 100-180 mm instelbaar	X	X	X
Beeldverwerking met randverbetering, gerelateerd aan framesnelheid	X	X	X
Opgeslagen beelden in JPG formaat	X	X	X
Opgeslagen video in .MP4 formaat	X	X	X
Drachtigheidsrapport in .PDF formaat	X	X	X
Cineloop: Max 128 frames (Cineloops opgenomen met hoge framesnelheden kunnen meer frames bevatten)	X	X	X
Gebruiksduur: Meer dan 3 uur bij continue gebruik	X	X	X
Spekdikte: automatisch meting en opslag van de gegevens		X	X
Koppeling dieridentificatie nummer dmv RFID lezen van FDX of HDX			X



Geen kabelbreuk meer mogelijk, compleet geleverd in robuuste koffer, duidelijke display met hoge resolutie.

Snelstart gids

1609930 MS Smartscan 3.0 (Met RFID module FDX en HDX)



1609931 MS Smartscan 2.0

1609932 MS Smartscan 1.0

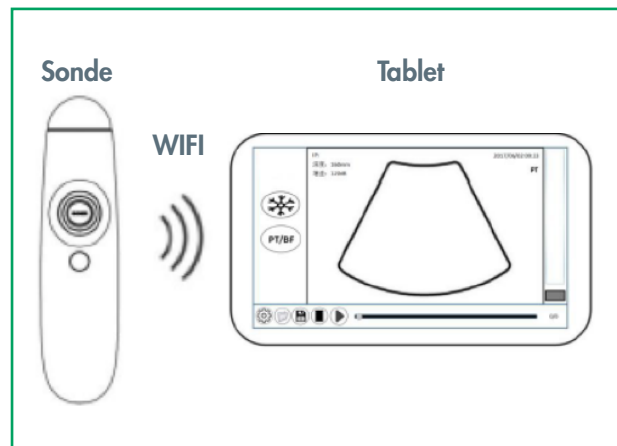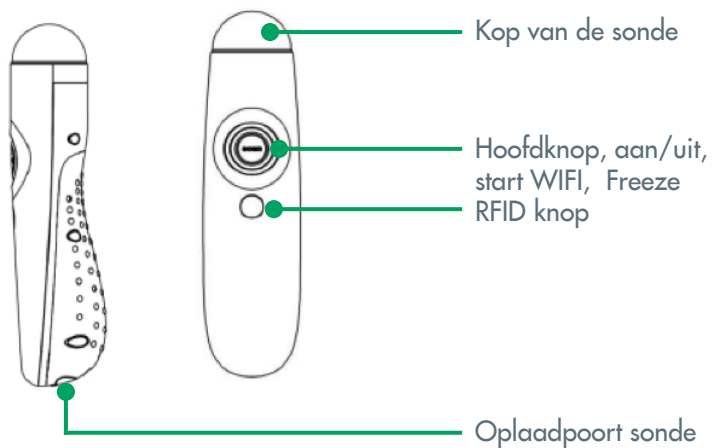

Lees eerst de gebruiksaanwijzing


De Smartscan app

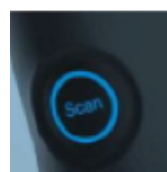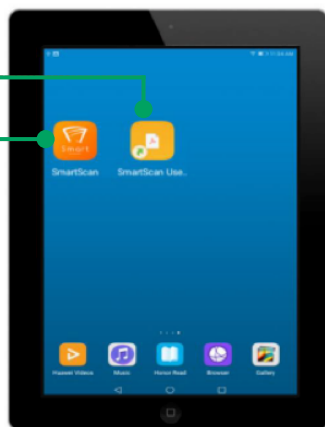

Druk de hoofdknop in en houd deze 7 seconden vast. Er begint een lampje te flikkeren. De sonde zal automatisch een werkend WIFI signaal zoeken.



Open nu de Smartscan app door op dit icoon te drukken. De tablet zal dan worden verbonden met sonde

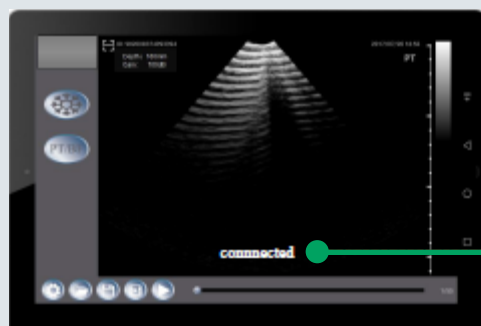

Connected, de sonde en tablet zijn verbonden

Druk nogmaals op de hoofdknop om met het scannen te beginnen.